


ひと手をかりずに、寝たまま排尿。

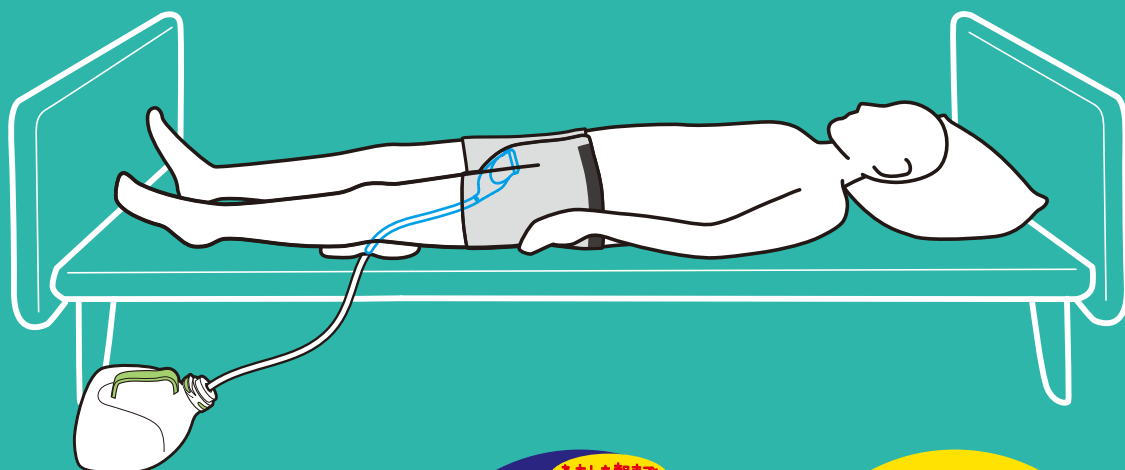

夜間
就寝用

寝て使う

装着型男性用集尿器



トイレに困っている
本人だけでなく、
介助をする方々の負担を
軽減します！



介護者・家族



本人

夜間の
おむつ替えが
なくなった

自分で出来るから
嬉しい

睡眠がとれるので
昼間の眠気が
無くなった

夜中に
起きなく
なった

夜間の負担が軽減できて
心身共に楽になった

皮膚トラブルが
減った

スッキリ排尿できる

シリコン製
柔らかレシーバ

2段構えの
逆流防止機構

大容量
集尿タンク

寝たまま使える〈装着型集尿器〉

ダンディコレクター



ひと手をかりずに、寝たまま排尿。

寝たまま使える〈装着型集尿器〉
ダンディユリナー

やさしさのカタチ

心地よい装着感と自然な排尿。
いつでも快適な睡眠を
提案いたします。



レシーバー receiver



肌にやさしい

医療グレードのシリコン



密着しない

波うち多孔の通気構造




柔らかい

触感さらさら、軽量



スムーズな流れ、
2段階の逆流防止

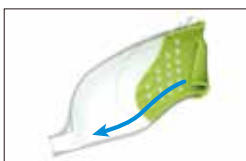

流れを確保する曲線



クッション性も兼ねた
逆流防止のかえし



やさしくシールする
肉薄の逆流防止膜

専用パンツ pants



かんたん着脱(フリーサイズ)

集尿タンク tank



持ちやすく、
捨てやすい
安心の大容量(2.8ℓ) グリップ

セット内容 set content



- ◆レシーバー(受尿器)
- ◆導尿チューブ 1.5m
- ◆集尿タンク 2.8ℓ
- ◆キャップ
- ◆専用パンツ
- ◆逆流防止膜
- ◆吸水シート
- ◆洗浄ブラシ


※ 部品単位でお求めいただくことも可能です。

仕様 Technical Parameter

商品名 ダンディユリナー
型番 AS-DUR010
レシーバー 寸法／W5.8 x D13.5 x H6.0cm 重量：約70g
集尿タンク 寸法／W30 x D24 x H11cm 重量：約390g

※仕様は予告なく変更になる場合がございます

臥位(仰向き/横向き)で使用可。うつ伏せは不可。

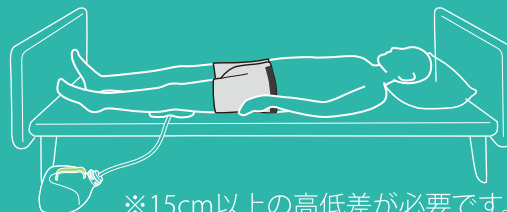

※15cm以上の高低差が必要です。

朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
TEL (052)684-6829 FAX (052)671-5196
E-Mail medical@asahi-sg.co.jp

● お問い合わせ